Simple® pro | ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97
Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com
info@simple-pro.com

ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№: РОСС RU.МН33.Н00113

Срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2023

№ 2224974

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Центр сертификации и исследований "Метрополь", Место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г.Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII, рег. № RA.RU.11МН33, Телефон 8(495)223-63-87, адрес электронной почты metronom_aa@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной). См. приложение на 5 листах (бланки № 0003533, 0003534, 0003535)

Серийный выпуск. Продукция изготовлена по ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

код ОК 005 (ОКП): ОК 034-2014 (ОКПД 2) 31.09.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

код ТН ВЭД России: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403901100; 9403890000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", ИНН 7804158696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", Адрес: 195009, РОССИЯ, г ОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-283И-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательных лабораторий промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80, протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО, рег. № RA.RU.21ШЛ96, сертификатов соответствия № TC RU C-CZ.AA15.B.00232, № TC RU C-RU.АТ21.В.00028

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия на изделии и в товаросопроводительной документации.

Схема сертификации – 3с

Руководитель органа _____ А.И. Бабаева

Эксперт _____ С.А. Бобровская

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕАС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового монолитного полипропилена, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листах.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403301100; 9403890000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" рег. № RA.RU.21ИН96; № 678-1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны хранить в крытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 **включительно**

М.П. КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00383/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020



Тумба встраиваемая
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Тумба встраиваемая предназначена для использования в лабораториях различного профиля. Тумбы используются в составе столов и вытяжных шкафов, путём встраивания в основное изделие на дополнительный металлический каркас.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТЯ-В	400×440×608	ЛДСП	24	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	31		3
ЛК-450 ТЯ-В	450×440×608	ЛДСП	26	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	33		3
ЛК-600 ТЯ-В	600×440×608	ЛДСП	34	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	37		3
ЛК-750 ТЯ-В	750×440×608	ЛДСП	39	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	43		3
ЛК-900 ТЯ-В	900×440×608	ЛДСП	44	Тумба имеет три выдвижных ящика	3
		Сталь	48		3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТЯ-В	400×440×738	ЛДСП	28 (29)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	33 (36)		3
ЛК-450 ТЯ-В	450×440×738	ЛДСП	30 (31)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	35 (38)		3
ЛК-600 ТЯ-В	600×440×738	ЛДСП	38 (40)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	41 (45)		3
ЛК-750 ТЯ-В	750×440×738	ЛДСП	44 (46)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	46 (50)		3
ЛК-900 ТЯ-В	900×440×738	ЛДСП	50 (52)	Тумба имеет три (четыре) выдвижных ящика	3
		Сталь	53 (55)		3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД-В	400×440×608	ЛДСП	20	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	21		1, 2, 3
ЛК-450 ТД-В	450×440×608	ЛДСП	22	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	23		1, 2, 3
ЛК-600 ТД-В	600×440×608	ЛДСП	26	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	27		1, 2, 3
ЛК-750 ТД-В	750×440×608	ЛДСП	31	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	31		1, 2, 3
ЛК-900 ТД-В	900×440×608	ЛДСП	35	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	35		1, 2, 3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД-В	400×440×738	ЛДСП	22	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	23		1, 2, 3
ЛК-450 ТД-В	450×440×738	ЛДСП	24	Тумба имеет одну дверку и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	25		1, 2, 3
ЛК-600 ТД-В	600×440×738	ЛДСП	28	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	29		1, 2, 3
ЛК-750 ТД-В	750×440×738	ЛДСП	34	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	36		1, 2, 3
ЛК-900 ТД-В	900×440×738	ЛДСП	38	Тумба имеет две дверки и одну съёмную полку	1, 2, 3
		Сталь	39		1, 2, 3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД-В (с ящиком)	400×440×550	ЛДСП	22	Тумба имеет выдвижной ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	25		1, 3
ЛК-450 ТД-В (с ящиком)	450×440×550	ЛДСП	24	Тумба имеет выдвижной ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	27		1, 3
ЛК-600 ТД-В (с ящиком)	600×440×550	ЛДСП	30	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	31		1, 3
ЛК-750 ТД-В (с ящиком)	750×440×550	ЛДСП	35	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	36		1, 3
ЛК-900 ТД-В (с ящиком)	900×440×550	ЛДСП	39	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	40		1, 3

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Материал корпуса	Масса изделия, кг	Описание	Доп. компл.
ЛК-400 ТД-В (с ящиком)	400×440×738	ЛДСП	24	Тумба имеет выдвижной ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	27		1, 3
ЛК-450 ТД-В (с ящиком)	450×440×738	ЛДСП	26	Тумба имеет выдвижной ящик, одну дверку и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	29		1, 3
ЛК-600 ТД-В (с ящиком)	600×440×738	ЛДСП	32	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	34		1, 3
ЛК-750 ТД-В (с ящиком)	750×440×738	ЛДСП	38	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	39		1, 3
ЛК-900 ТД-В (с ящиком)	900×440×738	ЛДСП	40	Тумба имеет выдвижной ящик, две дверки и одну съёмную полку	1, 3
		Сталь	44		1, 3

2.2. Описание

Корпус – ЛДСП вариант:

Корпус выполнен из ламинированной ДСП толщиной 16 мм, обработанной противоударным пластиком (PVC) толщиной 0,5 мм. Лицевые детали обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Цвет изделия может быть белым либо серым.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

Корпус – сталь вариант:

Корпус выполнен из листовой стали толщиной 0,8 мм и 1 мм, окрашенной порошковой краской. Нагрузка на тумбу не более 25 кг.

Цвет изделия может быть белым (RAL 9016) либо серым (RAL 7035).

Рама для тумбы металлическая сборно-разборная, окрашенная порошковой краской серого цвета.

2.3. Комплектация

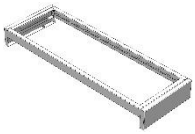
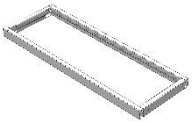
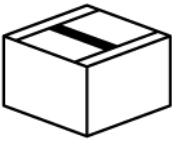
В *стандартную комплектацию* тумбы входят:

- Ручки из полиамида серого цвета;
- Рама для тумбы.

В *дополнительную комплектацию* тумбы входят (см. таблицу):

1) Полипропиленовая кювета;
2) Вытяжка из тумбы;
3) Замок.

3. Комплект поставки

№	1		2	3
Наименование	Сборно-разборная металлическая рама		Комплект фурнитуры	Тумба
	ТЯ; ТД	ТЯ-В; ТД-В		
				
Кол-во	**1 шт.**		**1 уп.**	**1 шт.**

4. Подготовка к сборке

4.1. Распаковать тумбу и раму для тумбы, проверить целостность покрытия;
4.2. Проверить комплектность;
4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки



Рис. 1. Установка высоких тумб на каркас

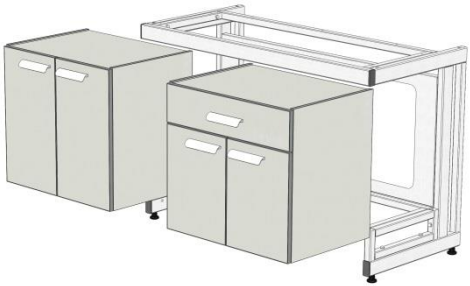


Рис. 1. Установка низких тумб на каркас

6. Инструкция по установке тумбы

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт, молоток.

6.1. Соединить раму тумбы с каркасом основного изделия согласно пунктам 3, 5 **«Инструкции по сборке каркаса»**;

6.2. Поместить тумбу на раму.

7. Инструкция по обслуживанию

Рекомендуется проводить периодическое обслуживание:

- Визуальный осмотр – ежемесячно;
- Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, фасадов с использованием обычных моющих не абразивных средств.

8. Правила эксплуатации

8.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

8.2. Тумбу необходимо оберегать от механических повреждений и от воздействия повышенной температуры.

8.3. Максимально допустимая нагрузка на полку - 7 кг.

Свидетельство о приёмке:

Тумба встраиваемая

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

_____/_____/_____

Подпись Расшифровка Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°С до +35°С и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°С, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°С – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°С.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. **Отгрузка товара**

1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, для моделей с использованием полипропилена или полиуретана, в том числе: Шкаф вытяжной химический модели ШВП, Шкаф для реактивов кислотостойкий модели ШРП, Мойка химическая СМС-ПВ, Стул GEMA – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
3. В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
4. Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
6. Срок службы изделия 10 лет.