Simple® pro | ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97
Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com
info@simple-pro.com

ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ


I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

Приложение №1: Инструкция по сборке каркаса

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

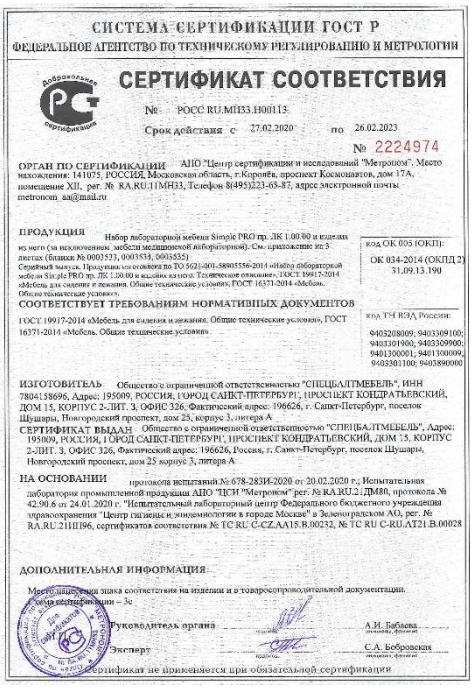

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№: РОСС RU.МП33.Н00113

Срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2023

№ 2224974

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Центр сертификации и исследований "Метрополь". Место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г.Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII, рег. № RA.RU.11МН33, Телефон 8(495)223-03-87, адрес электронной почты metronom_aa@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной). См. приложение из 3 листах (бланки № 0003533, 0003534, 0003535)
Серийный выпуск. Продукция изготовлена по ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

код ОК 005 (ОКП): ОК 034-2014 (ОКПД 2) 31.09.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

код ТН ВЭД России: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403301100; 9403890000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", ИНН 7804158696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326. Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 678-283И-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80, протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО, рег. № RA.RU.21ШЛ96, сертификатов соответствия № TC RU C-CZ.АА15.В.00232, № TC RU C-RU.АТ21.В.00028

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия на изделии и в товаросопроводительной документации.
Схема сертификации – 3с

Руководитель органа А.И. Бабаева

Эксперт С.А. Бобровская

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 1244881397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового монолитного полипропилена, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листах.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403301100; 9403890000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" рег. № RA.RU.21НЕ96; № 678-11552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80; Схема декларирования: 3д;


Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», пп. 4.2, 5.2.5, 5.7.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны хранить в кратком помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 **включительно**

(подпись) КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00383/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020

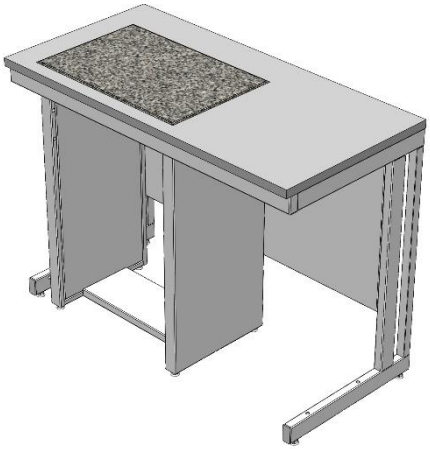

Стол весовой комбинированный
(ЛК-1200 СВ)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Стол весовой комбинированный модели СВ предназначен для использования в лабораториях различного профиля.
Модель ЛК-1200 СВ представляет собой комбинацию стола лабораторного ЛК-1200 СЛ с рабочей поверхностью из CPL или Lab HPL и стола весового ЛК-600 СВ (с габаритными размерами 600х400х770/900).
В рабочей поверхности имеется отверстие для гранитной плиты.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Масса изделия, кг
ЛК-1200 СВ	1200×600×770 | 1200×600×900	90

2.2. Описание

Каркасы: основой изделия являются два сборно-разборных металлических каркаса с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенных порошковой краской серого цвета.

Рабочая поверхность стола может быть выполнена из следующих материалов:

- CPL, цвет – белый или серый (торцы обработаны противоударным пластиком (PVC) серого цвета толщиной 2 мм);
- Монолитный химически стойкий пластик, цвет – серый (Lab HPL).

Внутренняя рабочая поверхность представляет собой гранитную плиту толщиной 30 мм, которая устанавливается на металлический каркас при помощи специальных резиновых демпферов.

Используемые ДСП материалы не превышают класса эмиссии формальдегида Е1.

2.3. Комплектация



В *стандартную комплектацию* стола входят:


- Регулируемые опоры.




В *дополнительную комплектацию* стола входят:

- Тумбы;
- Подвесной ящик;
- Подставка под системный блок;
- Блок розеток (220 В) с автоматом отключения питания (16 А) на декоративной панели.а

3. Комплект поставки

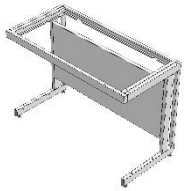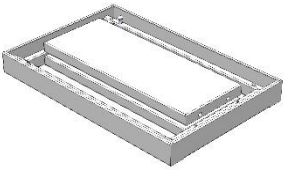№	**1**	**2**	**3**
Наименование	Разборный металлический каркас СЛ	Боковины каркаса СВ	Рама и панели каркаса СВ
			
Кол-во	**1 шт.**	**2 шт.**	**1 компл.**

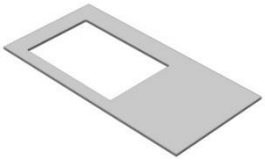№	**4**	**5**	**6**	**7**
Наименование	Рабочая поверхность СЛ	Рабочая поверхность СВ	Саморез 4х16 мм **[1]**	Саморез 4,2х9,5 мм **[2]**
				
Кол-во	**1 шт.**	**1 шт.**	**14 шт.**	**14 шт.**

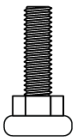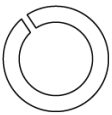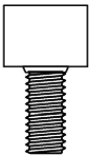№	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Наименование	Опора резьбовая М8	Болт М8х45	Болт М8х16	Шайба-гровер 8	Виброопора М8 D25х30
					
Кол-во	**4 шт.**	**8 шт.**	**8 шт.**	**16 шт.**	**4 шт.**

[1] Для крепежа столешницы из CPL;

[2] Для крепежа столешницы из Lab HPL.

4. Подготовка к сборке

4.1. Распаковать стол, проверить целостность покрытия;
4.2. Проверить комплектность;
4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

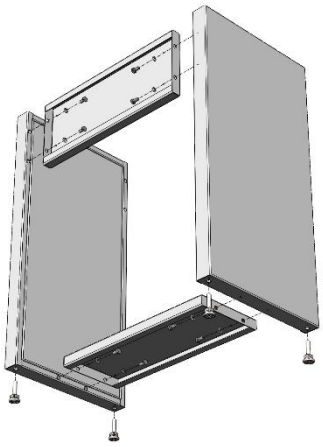


Рис. 1. Сборка каркаса СВ

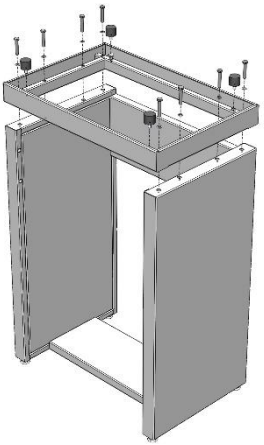


Рис. 2. Установка верхней рамы каркаса СВ

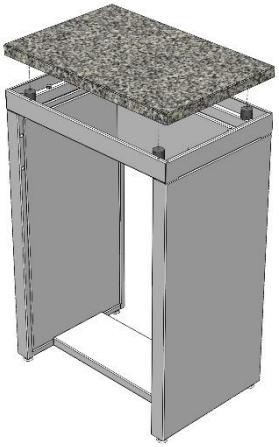


Рис. 3. Установка рабочей поверхности стола СВ

6. Инструкция по сборке стола

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт.

6.1. Собрать каркас СЛ согласно «Инструкции по сборке каркаса».

6.2. Собрать каркас СВ:

- Установить в боковины каркаса СВ регулируемые опоры *(Рис. 1)*.
- Соединить боковины с задней и нижней панелями каркаса СВ, используя болты М8х16, шайбы-гроверы 8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 *(Рис. 1)*.
- Установить на боковины верхнюю раму каркаса СВ, используя болты М8х45, шайбы-гроверы 8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 *(Рис. 2).*
- Установить в верхнюю раму виброопоры *(Рис. 2)*.

6.3. Положить рабочую поверхность на каркас СЛ.

6.4. Прикрепить её к каркасу, используя саморезы 4х16 или 4,2х9,5 (в зависимости от материала столешницы и ширины стола, до 14 шт.).

6.5. Установить каркас СВ внутри каркаса СЛ, выровнять по вырезу в рабочей поверхности стола СЛ.

6.6. Положить гранитную плиту на виброопоры каркаса СВ *(Рис. 3)*.

6.7. *Если стол комплектуется панелью с блоком розеток* – собрать и подключить вилку к электропитанию (при подключении в щиток, заземление – жёлто-зелёный провод).

6.8. Подключение электрики должно осуществляться аттестованным специалистом.

6.9. *Если стол комплектуется тумбой* – навесить тумбу (зацепить тумбу за заднюю панель каркаса).

6.10. Выставить изделие по уровню при помощи регулируемых опор.

6.11. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка на наличие царапин на каркасе, рабочей поверхности;
- уборка пыли, грязи с рабочей поверхности, используя обычные моющие не абразивные средства. Не допускается прямой контакт с водой частей изделия изготовленных из ЛДСП.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе.

7.4. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

8.1. Стол должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия химических реагентов и их паров.

8.3. Нагрузка на стол не должна превышать 250 кг.

Свидетельство о приёмке:

Стол весовой комбинированный

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

_____/_____/_____




Подпись Расшифровка Дата

ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Приложение 1

Комплект поставки каркаса

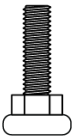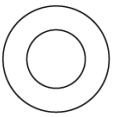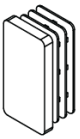№	1	2	3	4
Наименование	Опора резьбовая М8	Болт М8х16	Шайба 8	Заглушка 60х30 мм
				
Кол-во	**4 шт.**	**8 шт.**	**8 шт.**	**2 шт.**

Инструкция по сборке каркаса

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), киянка

1. Установить в боковины каркаса регулируемые опоры *(Рис. 1)*
2. Вставить в нижние части боковин заглушки 60х30 *(Рис. 2)*
3. Если предполагается установка низких тумб, закрепить на боковинах каркаса боковые рамы для тумб, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 *(Рис. 3)*

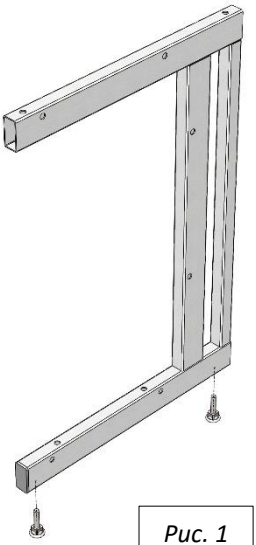


Рис. 1

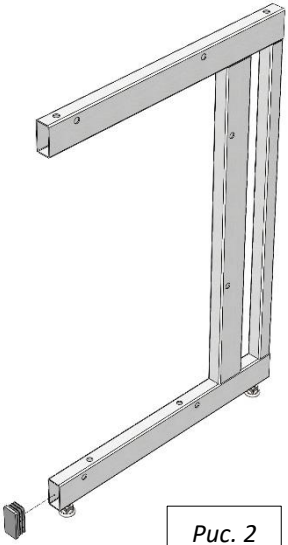


Рис. 2

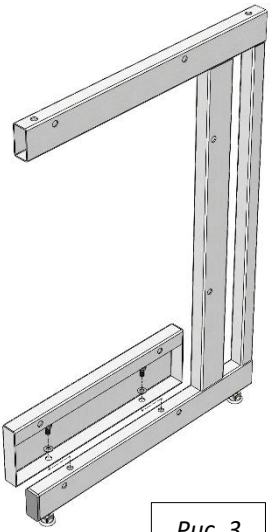


Рис. 3

4. Соединить боковины с верхней рамой и задней панелью каркаса, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 *(Рис. 4)*

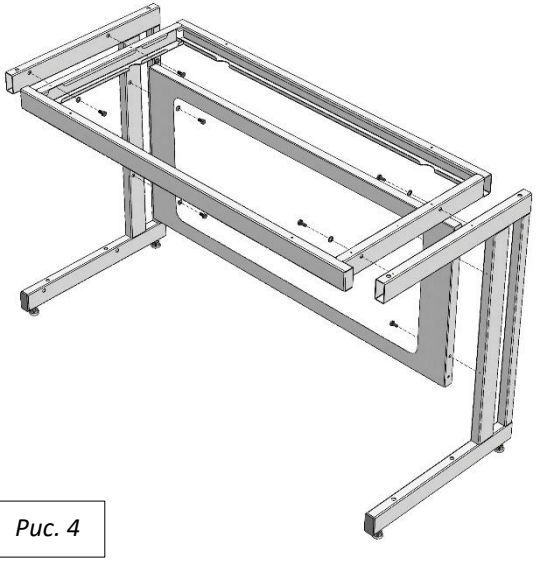


Рис. 4

5. Если предполагается установка тумб:

- В случае с одной тумбой – подготовить универсальную раму для тумб: установить регулируемые опоры; для низкой тумбы – закрепить на боковой раме верхнюю раму, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 *(Рис. 5.1; 5.2)*

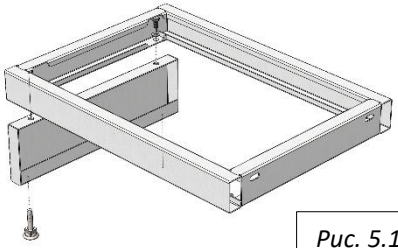


Рис. 5.1

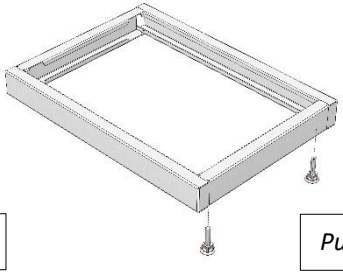


Рис. 5.2

- В случае тумбами шириной 1500 и 1800 – установить дополнительные регулируемые опоры; для низкой тумбы – закрепить на промежуточной раме верхнюю раму, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 *(Рис. 6.1; 6.2)*

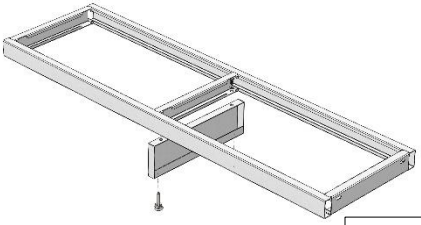


Рис. 5.1

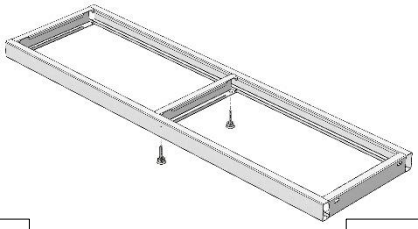


Рис. 6.2

- Установить раму для тумб, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 *(Рис. 7.1; 7.2; 7.3; 7.4)*

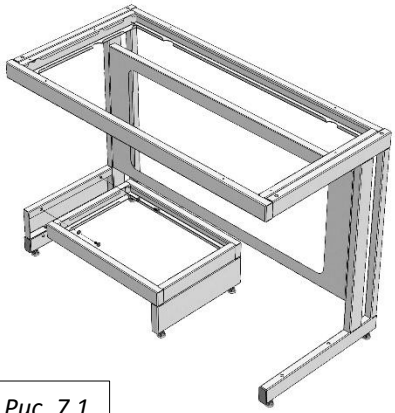


Рис. 7.1

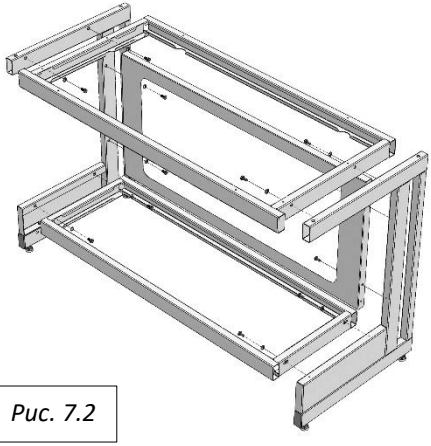


Рис. 7.2

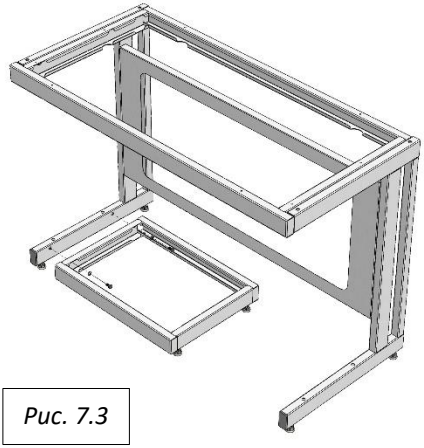


Рис. 7.3

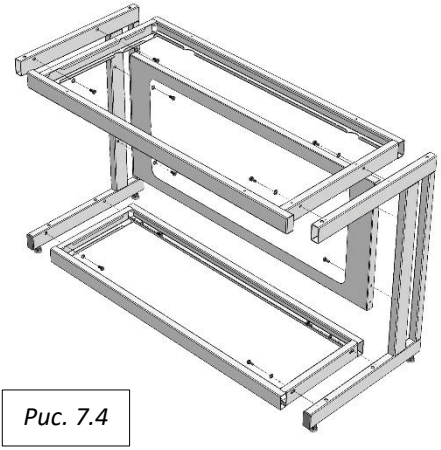


Рис. 7.4

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°С до +35°С и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°С, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°С – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°С.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. Отгрузка товара

1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, для моделей с использованием полипропилена или полиуретана, в том числе: Шкаф вытяжной химический модели ШВП, Шкаф для реактивов кислотостойкий модели ШРП, Мойка химическая СМС-ПВ, Стул GEMA – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
3. В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
4. Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
6. Срок службы изделия 10 лет.