Simple® pro | ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97
Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com
info@simple-pro.com

ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ


I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

Приложение №1: Инструкция по сборке каркаса

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

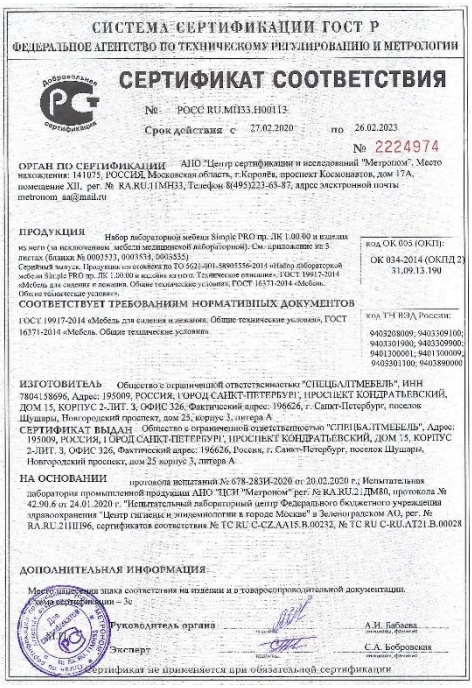

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№: РОСС RU.МП33.Н00113

Срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2023

№ 2224974

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Центр сертификации и исследований "Метрополь". Место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г.Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII, рег. № RA.RU.11МН33, Телефон 8(495)223-03-87, адрес электронной почты metronom_aa@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной). См. приложение из 3 листах (бланки № 0003533, 0003534, 0003535)
Серийный выпуск. Продукция изготовлена по ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

код ОК 005 (ОКП): ОК 034-2014 (ОКПД 2) 31.09.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

код ТН ВЭД России: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403301100; 9403890000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", ИНН 7804158696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326. Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А

НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 678-283И-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80, протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО, рег. № RA.RU.21ШЛ96, сертификатов соответствия № TC RU C-CZ.АА15.В.00232, № TC RU C-RU.АТ21.В.00028

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия на изделии и в товаросопроводительной документации.
Схема сертификации – 3с

Руководитель органа А.И. Бабаева

Эксперт С.А. Бобровская

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 1244881397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового монолитного полипропилена, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листах.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403301100; 9403890000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" рег. № RA.RU.21НЕ96; № 678-11552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80; Схема декларирования: 3д;


Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», пп. 4.2, 5.2.5, 5.7.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны хранить в кратком помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 **включительно**

(подпись) КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00383/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020

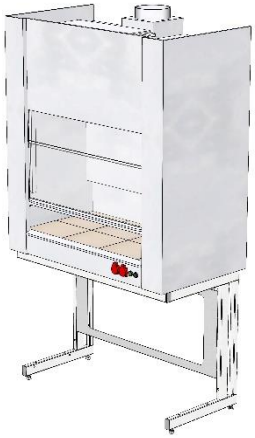

Шкаф вытяжной химический ШВП
(ЛК-900 ШВП, ЛК-1200 ШВП, ЛК-1500 ШВП, ЛК-1800 ШВП)
ГОСТ 16371-2014

1. Назначение

Шкаф вытяжной модели ШВП предназначен для работы с особо агрессивными химическими веществами, включая неорганические концентрированные кислоты (соляную, серную, азотную, плавиковую) и их пары. Допускается использование в условиях повышенной влажности, а также прямой контакт с водой и другими жидкостями.

2. Технические данные

2.1. Размеры

Модель	Габаритные размеры (Ш×Г×В), мм	Высота с поднятым экраном, мм	Высота подъёма защитного экрана, мм	Максимальная масса изделия, кг
ЛК-900 ШВП	925×680×2245 (2305*)	2245 (2305*)	660	185
ЛК-1200 ШВП	1225×680×2245 (2305*)	2245 (2305*)	660	216
ЛК-1500 ШВП	1525×680×2245 (2305*)	2245 (2305*)	660	247
ЛК-1800 ШВП	1825×680×2245 (2305*)	2245 (2305*)	660	280

* Высота изделия с учётом фланца.

2.2. Описание

Изделие разборной конструкции, состоящее из верхней части – вытяжной камеры и нижней части – каркаса.

Каркас: основой изделия является сборно-разборный металлический каркас с регулируемыми опорами (до 30 мм), окрашенный порошковой краской серого цвета.

Корпус выполнен из монолитного глянцевого полипропилена светло-серого цвета. В конструкции камеры недопустимо применение каких-либо металлических деталей для предотвращения коррозии изделия при работе с концентрированными кислотами.
Вытяжка воздуха осуществляется из верхней, средней и нижней части камеры, для удаления из рабочей зоны газов и паров.
Рабочая поверхность шкафа может быть выполнена из следующих материалов:

- Керамогранит;
- Монолитный химически стойкий пластик (Lab HPL);
- Бесшовный керамогранит (GranTec);
- Полипропилен.

2.3. Комплектация

В *стандартную комплектацию* шкафа входят:



- Полипропиленовый фланец диаметром 200 мм с каплесборником, расположенный на верхней крышке вытяжной камеры для подключения к вентиляции;
- Два зависимых друг от друга экрана, изготовленных из стекла триплекс толщиной 6 мм. Механизм подъёма расположен вне рабочей зоны. При полностью открытом рабочем пространстве, экраны не выходят за габариты вытяжного шкафа. В закрытом положении подъёмного экрана доступ воздуха в вытяжную камеру обеспечивается за счёт зазора в 10 мм между полипропиленовой ручкой и полипропиленовым противопроливочным бортиком. Высота рабочего проёма при полностью поднятом защитном экране – 660 мм. Подъёмным механизмом обеспечивается лёгкое перемещение и надёжное фиксирование экрана на любой заданной высоте. Система противовесов расположена за передними планками в шахтах;
- Светодиодный светильник 18 Вт (класс защиты IP-65), расположенный на верхней панели вытяжной камеры вне рабочей зоны. Освещённость в центре рабочей поверхности не менее 600 люкс;
- Брызгозащищённые электророзетки 220В, 16 А (2 шт.) с заземлением и выключатели, расположенные на передней правой панели вытяжной камеры;
- Электромонтажная коробка о.у. с клеммами КМ-222 102х102х43,5 IP 44 и дифференциальный автомат аварийного отключения питания 16 А с УЗО, расположенные на верхней панели с внешней стороны справа.

В *дополнительную комплектацию* шкафа входят:

- Автономный кислотостойкий вентилятор из полипропилена центробежного типа;
- Регулятор скорости вращения вентилятора;
- Взрывозащищённый светильник;
- Тумбы и вытяжка из тумб;
- Дополнительный блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания;
- Кран для подвода воды;
- Кран для подвода газа;

- Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума;
- Кран для деионизированной воды;
- Химический смеситель;
- Сливные раковины из полипропилена;
- Каплесборник по задней стенке;
- Встроенная нагревательная панель.

3. Комплект поставки

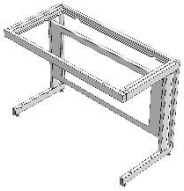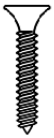№	1	2	3
Наименование	Разборный металлический каркас	Саморез 4х16 мм	Вытяжная камера (бокс)
			
Кол-во	**1 шт.**	**14 шт.**	**1 шт.**

4. Подготовка к сборке

4.1. Распаковать шкаф и проверить целостность покрытия;
4.2. Проверить комплектность;
4.3. Осуществить сборку согласно инструкции.

5. Схема сборки

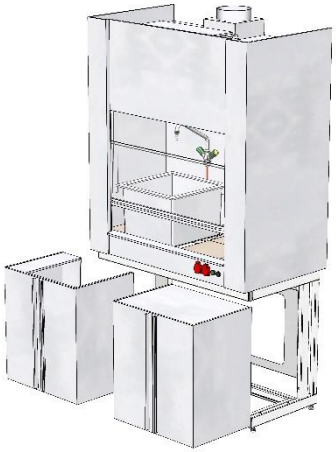


Рис. 1. Установка дополнительного оборудования

6. Инструкция по сборке

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), шуруповёрт, молоток.

6.1. Собрать каркас согласно «Инструкции по сборке каркаса».

6.2. *Если вытяжной шкаф комплектуется* тумбой необходимо установить её в соответствии с «Инструкцией по установке тумбы».

6.3. Установить вытяжной бокс на каркас, обеспечив свес дна бокса над верхней рамой каркаса в 40 мм; зафиксировать с помощью саморезов 4х16 мм через верхнюю раму.

6.4. *Если вытяжной шкаф комплектуется* сантехникой необходимо:

- Установить хим. кран и сливную раковину в вытяжную камеру;
- При установке сливной раковины края раковины обработать сантехническим хим. стойким герметиком. Для этого: нанести ровный шов герметика, установить мойку, оставить на 24 часа, потом срезать остатки герметика;
- Соединить гофротрубу со сливной раковиной и канализационным стоком воды;
- Соединить хим. кран (½" нар.) с подводом (источником) воды.

6.5. Подключение сантехники должно осуществляться аттестованным специалистом.

6.6. *Если вытяжной шкаф комплектуется* нагревательной панелью, нанести на неё уплотнитель (в комплекте), вставить нагревательную панель в соответствующий вырез.

6.7. Подключить вытяжную камеру к вентиляции (на крышке вытяжной камеры имеется фланец Ø200 мм).

6.8. Подключить вилку вытяжного шкафа к электропитанию (при подключении в щиток, заземление – жёлто-зелёный провод).

6.9. Подключение электрики должно осуществляться аттестованным специалистом.

6.10. При дополнительной установке газовых кранов, вентилей, патрубков, подключение и приобретение подводки и комплектующих (для газов) осуществляется потребителем.

6.11. Выставить изделие по уровню.

6.12. Снять защитную плёнку с корпуса шкафа.

6.13. Завести журнал по эксплуатации, зафиксировать дату пуска в эксплуатацию.

7. Инструкция по обслуживанию

7.1. Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.

7.2. В ежемесячный осмотр входят:

- визуальный осмотр – проверка состояния тросов; проверка электрифицированных изделий, светильника; проверка герметичности газовой, водяной подводок, сифонов;
- уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, используя обычные моющие не абразивные средства.

7.3. В ежегодный осмотр входят: ежемесячный осмотр; подкраска царапин на каркасе; смазка направляющих; проверка и регулировка движения грузов; проверка вентиляции с измерением скорости аспирации вытяжной системы.

7.4. Проверка и регулировка движения грузов, в случае необходимости, может проводиться ежеквартально.

7.5. Ежегодный осмотр может быть проведен сервисной службой ООО «СпецБалтМебель».

8. Правила эксплуатации

8.1. Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажностью от 45% до 75%.

8.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

8.3. Защитный экран вытяжного шкафа следует опускать и поднимать плавно, без рывков и ударов.

8.4. Нагрузка на рабочую поверхность шкафа не должна превышать 100 кг.

8.5. При использовании нагревательных плит в рабочей камере шкафа ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- располагать нагревательные элементы плит на расстоянии менее 15 см от вытяжного щита, боковых и задней стенок шкафа;
- допускать нагрев полипропиленовых конструкционных элементов вытяжной камеры более 40° С. Для этого вытяжная вентиляция должна иметь достаточную производительность для удаления разогретого воздуха.
- В случае несоблюдения данных требований существует риск изменения геометрических параметров элементов конструкции (коробление материала). Предприятие-изготовитель в этом случае ответственности не несёт.

ЗАПРЕЩЕНО: Проводить работы с едкими и агрессивными веществами (особенно с концентрированными неорганическими кислотами) и хранить такие вещества в вытяжном шкафу ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОЙ СИСТЕМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ.
Вытяжная система должна обеспечивать достаточный воздухообмен для удаления паров вредных веществ. Линейная скорость воздуха в рабочем проеме вытяжного шкафа при любых условиях должна быть не менее 0,5 м/с.
В случае невыполнения данных требований отдельные детали и механизмы вытяжного шкафа (ролики, держатели троса, сам трос и пр.) могут подвергнуться разрушению и выйти из строя. В случае несоблюдения данных требований производитель снимает с себя гарантийные обязательства.

Свидетельство о приёмке:

*Шкаф вытяжной химический*_____

Наименование и обозначение

Изготовлен(а) и принят(а) в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документации и признан(а) годным(ой) для эксплуатации

Начальник ОТК

МП

_____/_____/_____

Подпись Расшифровка Дата



ВНИМАНИЕ!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

Гарантийный срок эксплуатации стёкол в вытяжном шкафу (защитных экранов) – 6 месяцев с даты отгрузки.

Приложение 1

Комплект поставки каркаса

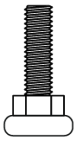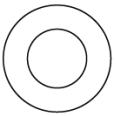№	1	2	3	4
Наименование	Опора резьбовая М8	Болт М8х16	Шайба 8	Заглушка 60х30 мм
				
Кол-во	**4 шт.**	**8 шт.**	**8 шт.**	**2 шт.**

Инструкция по сборке каркаса

Для сборки необходимо: разводной ключ (или ключ «на 13»), киянка

1. Установить в боковины каркаса регулируемые опоры *(Рис. 1)*
2. Вставить в нижние части боковин заглушки 60х30 *(Рис. 2)*
3. Если предполагается установка низких тумб, закрепить на боковинах каркаса боковые рамы для тумб, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 *(Рис. 3)*

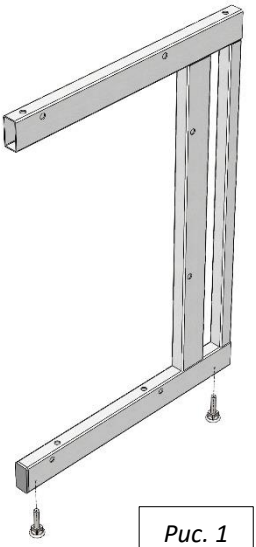


Рис. 1

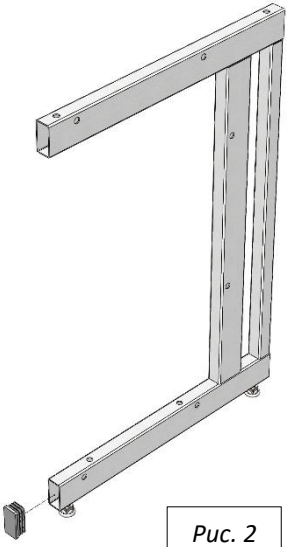


Рис. 2

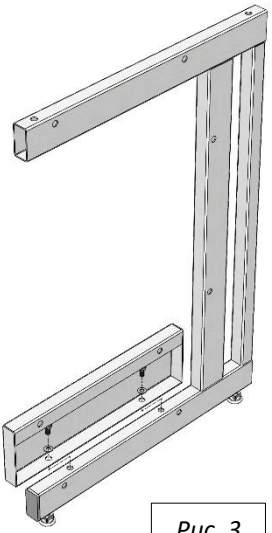


Рис. 3

4. Соединить боковины с верхней рамой и задней панелью каркаса, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 *(Рис. 4)*

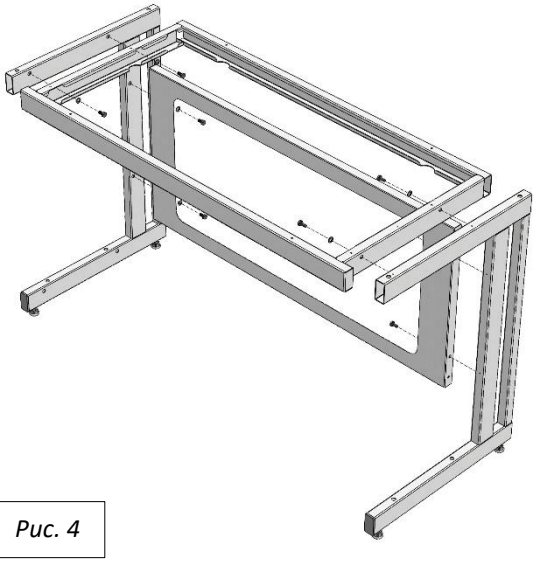


Рис. 4

5. Если предполагается установка тумб:

- В случае с одной тумбой – подготовить универсальную раму для тумб: установить регулируемые опоры; для низкой тумбы – закрепить на боковой раме верхнюю раму, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 *(Рис. 5.1; 5.2)*

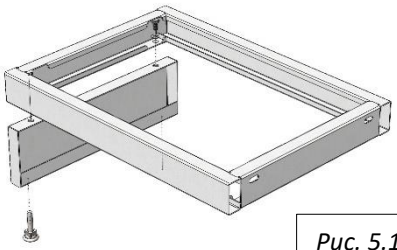


Рис. 5.1

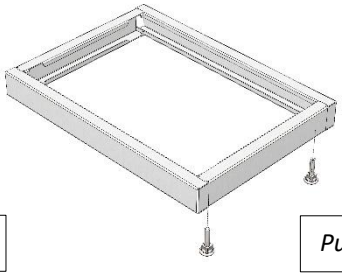


Рис. 5.2

- В случае тумбами шириной 1500 и 1800 – установить дополнительные регулируемые опоры; для низкой тумбы – закрепить на промежуточной раме верхнюю раму, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные заклёпки-гайки М8 *(Рис. 6.1; 6.2)*

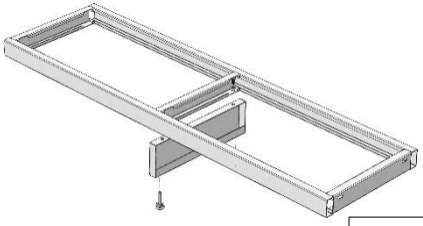


Рис. 5.1

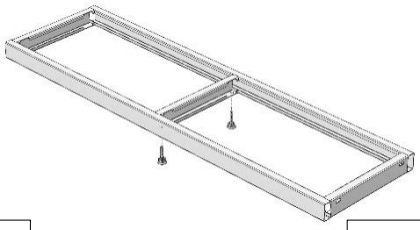


Рис. 6.2

- Установить раму для тумб, используя болты М8х16, шайбы 8 и предусмотренные в боковинах заклёпки-гайки М8 *(Рис. 7.1; 7.2; 7.3; 7.4)*

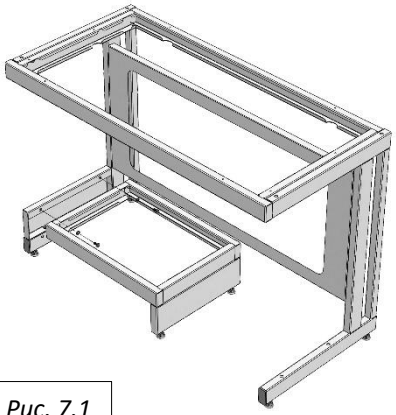


Рис. 7.1

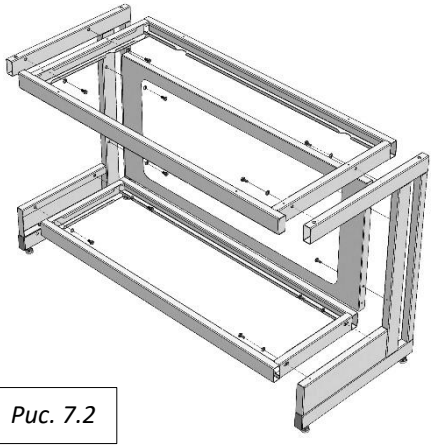


Рис. 7.2

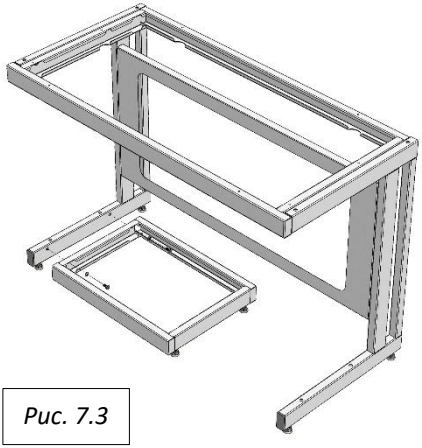


Рис. 7.3

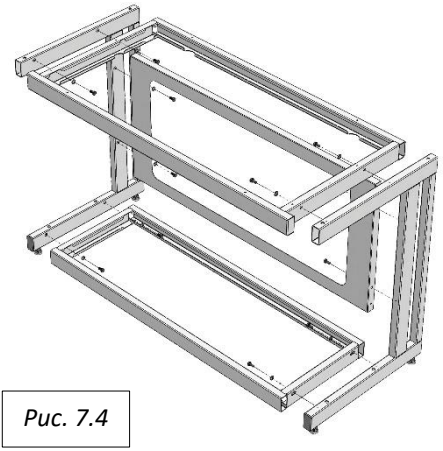


Рис. 7.4

Транспортировка и хранение

1. Изделия транспортируются всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
3. Изделия транспортируются в упаковке Предприятия-изготовителя при температуре от -25°С до +50°С и относительной влажности 80%.
4. Упаковка выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ 16371-2014 и «Рекомендациями по организации производства мебели и поставке её торгующим организациям в разобранном виде» (из гофрокартона – для ламинированных деталей, из полиэтилена – для металлических рам).
5. Изделия должны храниться в упакованном виде в сухих крытых помещениях, при температуре воздуха от +2°С до +35°С и относительной влажности от 45% до 70%, в условиях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Полы в помещениях должны быть горизонтальные и ровные, изолированные от влаги.
6. При хранении и транспортировании изделия не должны испытывать воздействия нагрузок, приводящих к остаточным деформациям.
7. Изделия, транспортируемые при температуре от 0 до 10°С, допускается распаковывать не менее чем через 24 ч, а при температуре ниже 0°С – не менее чем через 48 ч после переноса их в теплое помещение. Снятие упаковки с полипропиленовых изделий производят при температуре не ниже 15°С.

Правила отгрузки товара со склада ООО «СпецБалтМебель»

1. **Отгрузка товара**

1.1. Отгрузка товара осуществляется:

- Юридическим лицам – при наличии доверенности, паспорта и печати организации;
- Физическим лицам – при наличии паспорта.

1.2. Отгрузка товара на условиях самовывоза осуществляется со склада ООО «СпецБалтМебель» представителю транспортной компании по заявке ООО «СпецБалтМебель» или представителю транспортной компании по заявке Покупателя.

Адрес, режим работы склада и карту проезда вы можете посмотреть на нашем сайте *Simple-PRO.com* в разделе «Контакты».

1.3. Подача груза осуществляется только на борт автотранспортного средства. Распределение, установка, закрепление груза в кузове осуществляется силами водителя/перевозчика/экспедитора.

1.4. Отгрузка товара наёмным транспортом:

- Дату и время доставки Покупатель согласовывает с отделом логистики;
- Доставка осуществляется до подъезда на адрес, указанный при оформлении заказа. Приём-передача товара осуществляется у автотранспорта

Перевозчика. Выгрузка, подъём на этаж, сборка и прочее – не входит в услугу доставки и осуществляется силами и за счёт покупателя;

- Время ожидания водителем-экспедитором Покупателя по адресу доставки составляет не более 20 минут, повторная доставка товара Покупателю (вне зависимости от суммы заказа) оплачивается Покупателем повторно.

2. Приёмка товара покупателем

При приёмке товара Покупатель должен проверить соответствие маркировки и количество получаемого товара по накладной, а также осмотреть целостность упаковки Товара. В случае нарушения упаковки проверить целостность товара и составить коммерческий акт о повреждении груза в присутствии представителя транспортной компании.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 и ТО 5621-001-58905556-2014 при соблюдении правил эксплуатации, хранения, сборки (для изделий, поставляемых в разобранном виде) и транспортирования.
2. Гарантийный срок эксплуатации – 3 года, для моделей с использованием полипропилена или полиуретана, в том числе: Шкаф вытяжной химический модели ШВП, Шкаф для реактивов кислотостойкий модели ШРП, Мойка химическая СМС-ПВ, Стул GEMA – 5 лет с момента продажи (отгрузки).
3. В течение гарантийного срока эксплуатации Предприятие-изготовитель обеспечивает бесплатный ремонт в случае обнаружения производственных недостатков. Для этого Потребитель должен составить акт установленного образца о необходимости ремонта и направить Предприятию-изготовителю.
4. Недостатки мебели или деталей, образовавшиеся вследствие нарушения порядка или технологии сборки, не являются гарантийным случаем и устраняются за счет Потребителя.
5. Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.
6. Срок службы изделия 10 лет.