Simple® pro | ЗАВОД ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

8 (800) 222 32 97
Звонок по России бесплатный

www.simple-pro.com
info@simple-pro.com

ООО «СпецБалтМебель»
г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1. Назначение
2. Технические данные
3. Комплект поставки
4. Подготовка к сборке
5. Схема сборки
6. Инструкция по сборке
7. Инструкция по обслуживанию
8. Правила эксплуатации

II. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

III. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№: РОСС RU.МН33.Н00113

Срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2023

№ 2224974

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ АНО "Центр сертификации и исследований "Метрополь", Место нахождения: 141075, РОССИЯ, Московская область, г.Королёв, проспект Космонавтов, дом 17А, помещение XII, рег. № RA.RU.11МН33, Телефон 8(495)223-63-87, адрес электронной почты metronom_aa@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной). См. приложение на 5 листах (бланки № 0003533, 0003534, 0003535)

Серийный выпуск. Продукция изготовлена по ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

код ОК 005 (ОКП): ОК 034-2014 (ОКПД 2) 31.09.13.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

код ТН ВЭД России: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403901100; 9403890000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", ИНН 7804158696, Адрес: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ", Адрес: 195009, РОССИЯ, г ОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Фактический адрес: 196626, Россия, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25 корпус 3, литера А

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 678-283И-2020 от 20.02.2020 г.; Испытательных лабораторий промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80, протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в Зеленоградском АО, рег. № RA.RU.21ШЛ96, сертификатов соответствия № TC RU C-CZ.AA15.B.00232, № TC RU C-RU.АТ21.В.00028

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Место нанесения знака соответствия на изделии и в товаросопроводительной документации.

Схема сертификации – 3с

Руководитель органа _____ А.И. Бабаева

Эксперт _____ С.А. Бобровская

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ЕАС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А ОГРН: 1027802485457, Номер телефона: +8 124481397, Адрес электронной почты: info@simple-pro.com

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРОЛЁВА ДМИТРИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА

заявляет, что Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него (за исключением мебели медицинской лабораторной) из ламинированных древесно-стружечных плит, листовой стали, листового монолитного полипропилена, в том числе с встроенными электроосветительными приборами. Состав см. приложение № 1 на 3 листах.

Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " СПЕЦБАЛТМЕБЕЛЬ ", Место нахождения: 195009, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ КОНДРАТЬЕВСКИЙ, ДОМ 15, КОРПУС 2-ЛИТ. 3, ОФИС 326, Адрес места осуществления деятельности: 196626, РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Новгородский проспект, дом 25, корпус 3, литера А

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТО 5621-001-58905556-2014 «Набор лабораторной мебели Simple PRO гр. ЛК 1.00.00 и изделия из него. Техническое описание», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9403208009; 9403309100; 9403301900; 9403309900; 9401300001; 9401300009; 9403301100; 9403890000

Серийный выпуск

Соответствует требованиям Технический регламент Таможенного союза 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 42.90.6 от 24.01.2020 г. "Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" рег. № RA.RU.21ИН96; № 678-1552-2020 от 28.01.2020 г. Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метрополь" рег. № RA.RU.21ДМ80; Схема декларирования: 3д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.30, 5.2.31, 5.3.1, 5.3.2, 5.4, 5.5, 6.5, 8.3, 9; ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия», пп. 4.2, 5.2.5, 5.2.16, 5.2.18, 5.2.8, 5.3, 5.4, 5.5, 8, 9; Условия и сроки хранения: Изделия мебели должны хранить в крытом помещении, при температуре не ниже +2 °С и относительной

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 03.03.2025 **включительно**


М.П. КОРОЛЁВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

(подпись) (Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МН33.В.00383/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 04.03.2020

ПАСПОРТ
ВЕНТИЛЯТОР КИСЛОТОСТОЙКИЙ

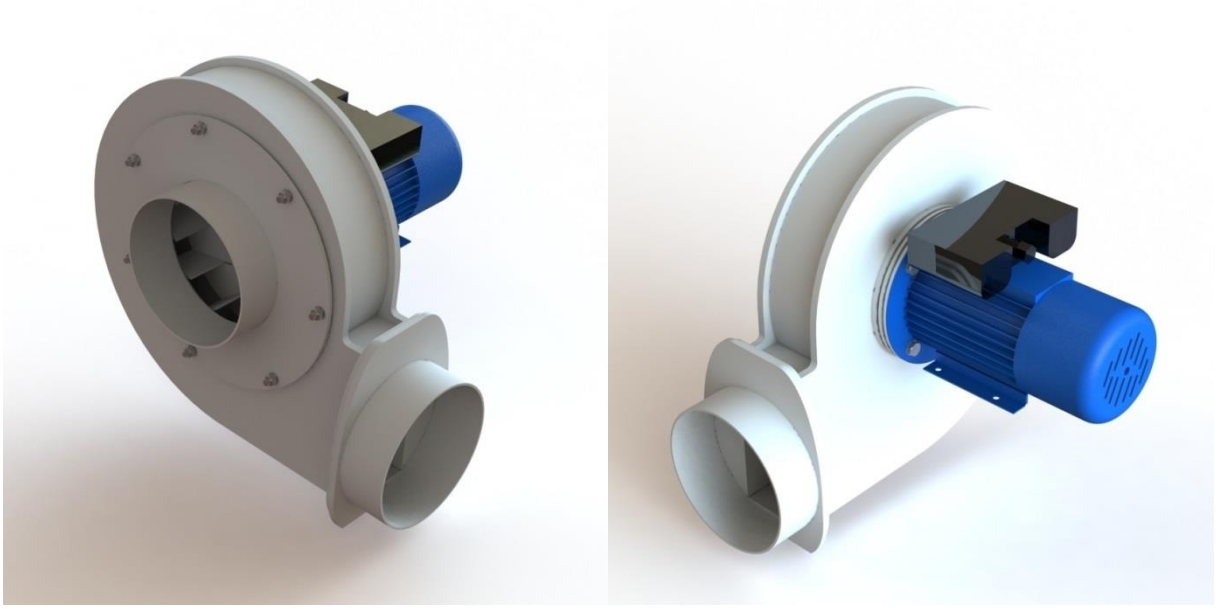

1. Назначение и область применения

Вентилятор кислотостойкий представляет собой механическое устройство, предназначенное для перемещения воздуха, содержащего пары химических реагентов и коррозионно-активных веществ, по воздуховодам систем кондиционирования и вентиляции, и создающее необходимый для этого перепад давлений (на выходе и входе вентилятора).

Электродвигатель однофазный на напряжение 230В +-10%


Корпус изготавливается из полипропилена, обладающего высокой химической стойкостью.

2. Основные технические параметры вентилятора

Наименование	**n**, об/мин	**Мощность**, Вт	**Ток**, А	**Макс. производительность**, м. куб./час
Вентилятор кислотостойкий	1400	550	3.95	1200

Габаритные размеры вентилятора

Размеры, мм					**Вес**, кг
L	**S**	**H**	**d**	**ds**	
590	488	535	200	60	19

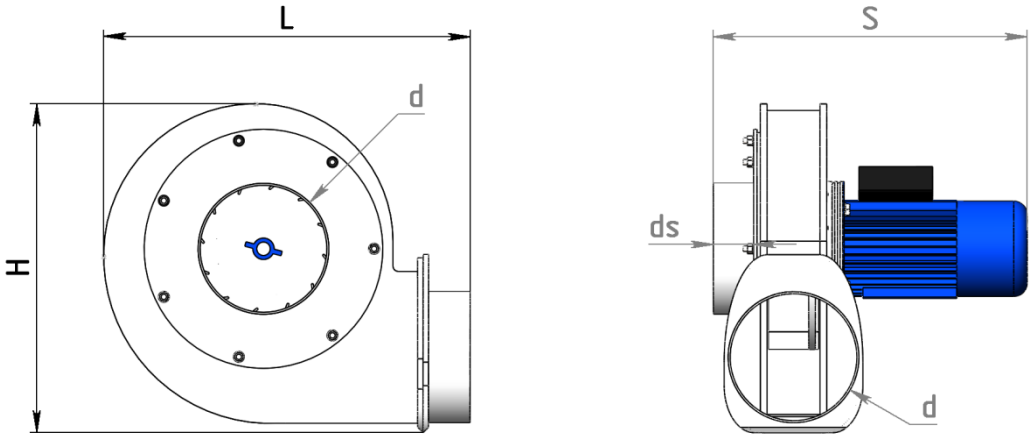


Шумовые характеристики: работающий вентилятор не превышает уровень шума 80 дБ.

3. Комплект поставки

№	1	2	3
Наименование	Гофра Ø200 L=700мм – 1 шт.	Хомут универсальный Ø100-315 мм	Хомут спиральный Ø190-210мм
			
Кол-во	**1 шт.**	**2 шт.**	**2 шт.**

Для установки на шкаф вытяжной

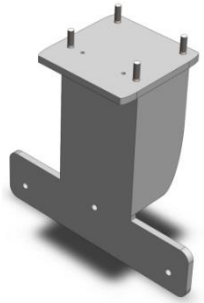
№	1	2	3
Наименование	Подставка	Шайба 8	Гайка М8
			
Кол-во	**1 шт.**	**4 шт.**	**4 шт.**

4. Электроподключение


Электрические подключения должен проводить только квалифицированный персонал, имеющий необходимый допуск к выполнению данных работ. Все элементы, требующие электрического подключения, имеют электросхемы, в соответствии с которыми необходимо произвести подключение. Схемы продублированы на корпусах соответствующих элементов.


Электросхемы подключения вентиляторов

Клеммная колодка вентилятора

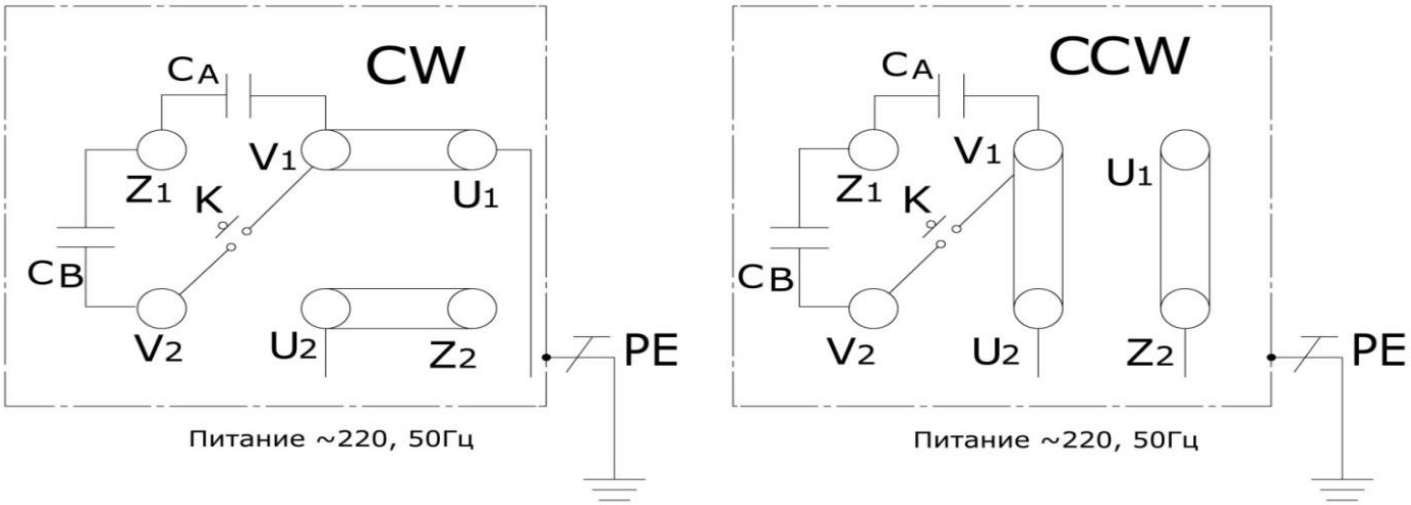

5. Схема установки вентилятора на крышку шкафа вытяжного

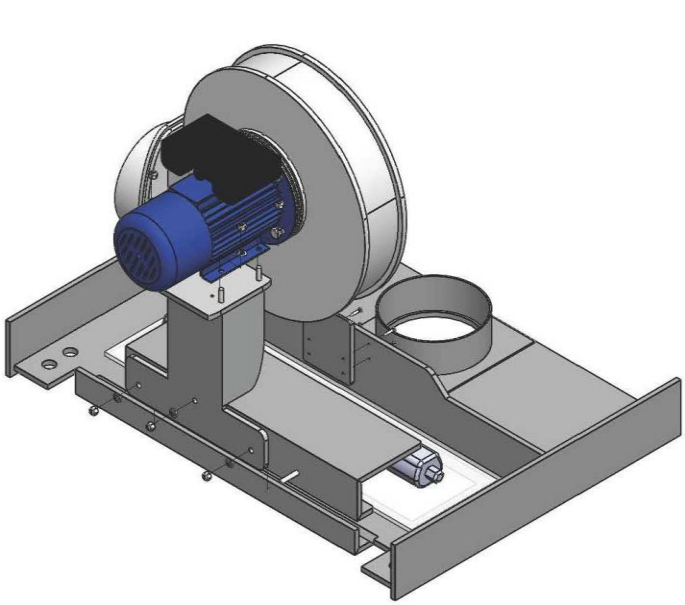

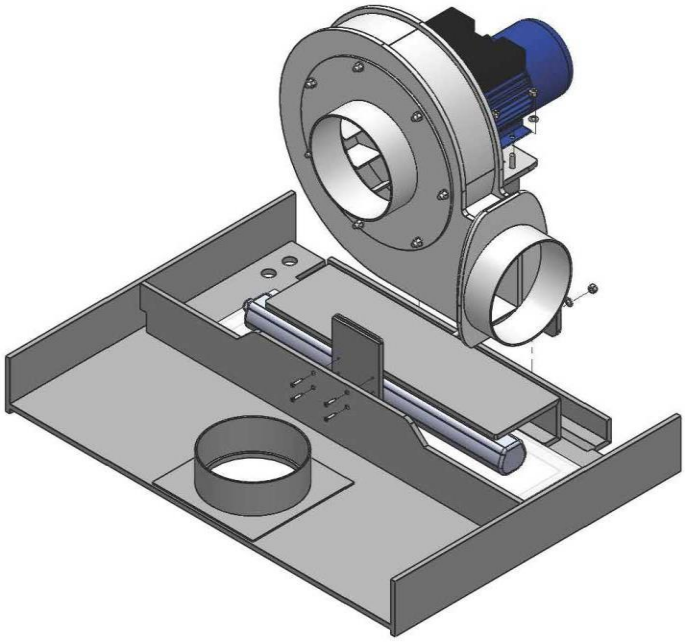

6. Инструкция по обслуживанию

6.1 Зарегистрировать в журнале эксплуатации ежемесячный и ежегодный осмотр.
6.2 В ежемесячный осмотр входит: визуальный осмотр.
6.3 Ежегодный осмотр: визуальный осмотр, очистка рабочего колеса, внешней и внутренней части корпуса (при необходимости).

7. Правила эксплуатации

7.1 Вентилятор должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.
7.2 Вентилятор необходимо оберегать от механических повреждений, а электродвигатель вентилятора - от воздействия повышенной температуры и влажности.
7.3 Вентилятор не должен эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо соединение с дымоходами.
7.4 Вентилятор не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи и т.п.
7.5 Не рекомендуется производить частое включение и выключение вентилятора.

8. Сведения о транспортировке и хранении

8.1 Вентиляторы транспортируются любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов действующими на данном виде транспорта.
8.2 Вентиляторы следует транспортировать и хранить в условиях, исключающих их механическое повреждение.
8.3 Вентиляторы должны хранить в условиях, исключающих их механическое повреждение. Условия хранения вентиляторов должны обеспечивать их защиту от прямых атмосферных воздействий.

9. Гарантийные обязательства

9.1 Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей в течение **одного года**, при соблюдении вышеуказанных правил ухода.
9.2 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет.
9.3 Гарантийный срок исчисляется со дня отгрузки.
9.4 Если в течение гарантийного срока хранения будут обнаружены производственные дефекты, потребителем должен быть составлен акт установленного образца о необходимости ремонта, который направляется на организацию – изготовитель (продавец).
9.5 Все предъявляемые Потребителем рекламации по нарушению комплектации изделия принимаются в течение 14 дней с момента получения.

Свидетельство о приемке: **Вентилятор кислотостойкий**

Представитель ОТК _____ (подпись) **М.П. _____**

Примечание: ООО «СпецБалтМебель» оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию изделий без предварительного уведомления.